

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



معدات طحن أخرى

مطحنة صغيرة

MF

مطحنة صغيرة لطحن الحبوب والأعشاب الطبية إلى مسحوق ناعم من 50 إلى 200 شبكة. مثالية للاستخدام المنزلي والمختبرات الصغيرة.

<https://www.planetaryballmills.com/ar/products/grinding-series/other-grinding-equipment/small-grinder.html>



نظرة عامة على المنتج

مطحنة صغيرة لطحن الحبوب والأعشاب الطبية إلى مسحوق ناعم من 50 إلى 200 شبكة. مثالية للاستخدام المنزلي والمختبرات الصغيرة.





Small Grinding Machine

Multi-Grain Grinder

Grinding Fineness Up to
50-200 Mesh

Low Noise, Fine Grinding

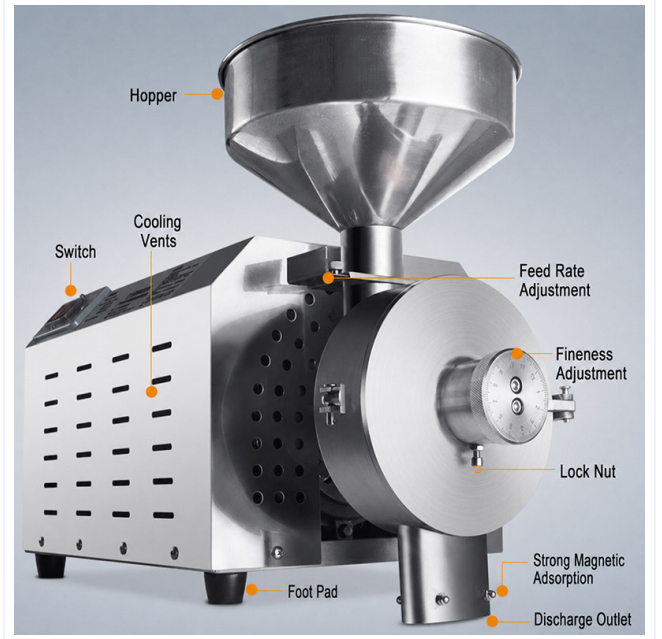

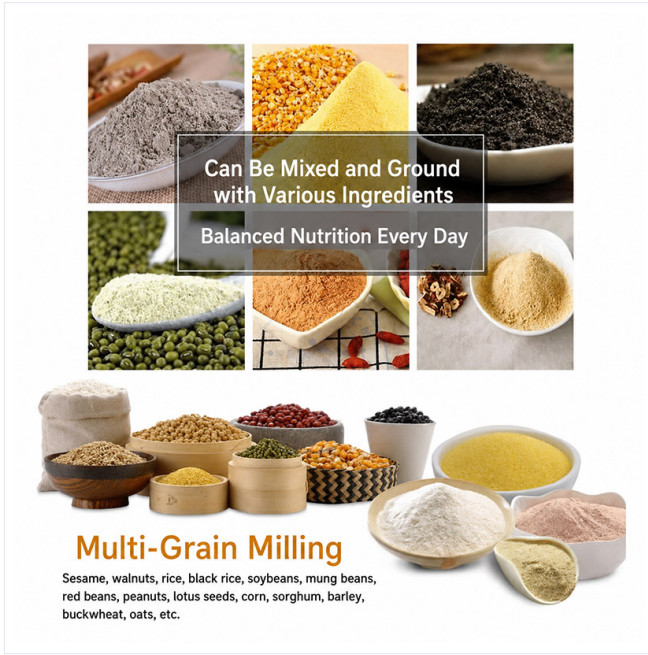

Can Be Mixed and Ground with Various Ingredients
Balanced Nutrition Every Day

Multi-Grain Milling
Sesame, walnuts, rice, black rice, soybeans, mung beans, red beans, peanuts, lotus seeds, corn, sorghum, barley, buckwheat, oats, etc.



Powder Outlet Strong Magnetic Filtration
Four strong magnets at the powder outlet absorb trace metal particles from grinding-disc wear, ensuring safety and hygiene.

Strong Magnetic Adsorption

مقدمة المنتج


مطحنة الحبوب الصغيرة، وتسمى أيضاً مطحنة الحبوب، هي آلة تقوم بطحن الحبوب المختلفة والمواد الطبية الصينية وغيرها من الأطعمة إلى مسحوق موحد من 50 إلى 200 شبكة. الآلة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة ومبنية باستخدام تقنية التشطيب. تعتمد طاحونة الطحن على قرصي طحن مملوءين بأخاديد مسننة لطحن بعضها البعض لطحن المواد إلى مسحوق. يمكنها طحن الحبوب المختلفة، المواد الطبية الصينية، المواد الخام للبهارات والمواد الأخرى إلى مساحيق موحدة من 50 إلى 200 شبكة.

إنها تتكون بشكل رئيسي من قادوس التغذية، الدوار، القرص المسنن، الشاشة، الغلاف، قاعدة الآلة، المحرك وأجزاء أخرى. عندما يسبب التأثير المستمر للأسنان المستديرة والأسنان تدخل المادة إلى غرفة التكسير، يتم تكسيرها بسرعة إلى مسحوق ناعم أو ملاط المسطحة واحتكاك القرص المسنن. تحت تأثير قوة الطرد المركزي وتدفق الهواء، فإنه يمر عبر فتحات الغربال ويتم تفريره في الهواء الطلق من خلال منفذ التفرغ.

المعلومات التقنية

نموذج	(الجهد (الخامس	(الطاقة (ث	السرعة (دورة (في الدقيقة	(السعة (كجم	حجم جسيمات (التغذية (مم	حجم جسيم التفرغ ((شبكة	الوزن ((كجم	(الأبعاد (مم
MF2200	220/380	2200	1540	30~50	10	50~200	50	690*380*400
MF3000	220/380	3000	1450	30~50	10	50~200	55	690*380*400
MF3500	220	3500	1450	30~50	10	50~200	70	750*380*400
MF4000	380	4000	1450	30~50	10	50~200	70	750*380*400

1. Hopper
2. Feed Rate Adjusting Valve
3. Screw Chamber Lock
4. Grinding Fineness Adjustment
5. Outlet
6. Magnetic Collector
7. Switch
8. Stainless Steel Housing
9. Cooling Vents
10. Foot Pad

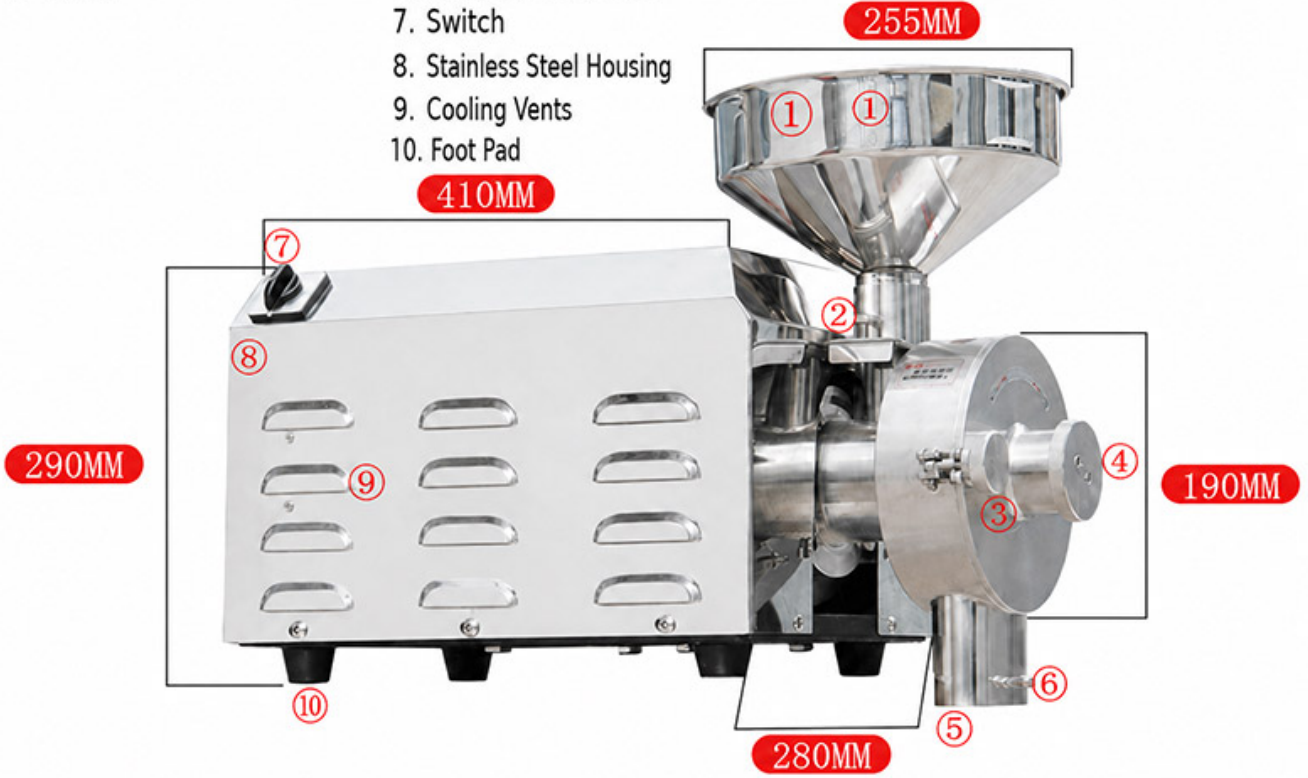

مميزات المنتج

1. مريحة للغاية للعمل.

2. لا يتم وضع الزبدة على الأجزاء الموجودة في تجويف الآلة والتي تكون على اتصال مع المواد، مما يحافظ على نظافة ونظافة المواد التي يتم طحنها. لا حاجة إلى مواد تشحيم، مما يضمن النظافة وعدم التلوث.

3. الصوت منخفض جداً. تم تصنيع الأجزاء بدقة وإجراءات الفحص صارمة. لن يتم استخدام الأجزاء غير المؤهلة. بعد تجميع الماكينة، تم اختبارها من قبل المهندسين وفحصها بدقة على جميع المستويات للتأكد من أن مطحنة الحبوب تلبى متطلبات التصميم بدقة. تعمل الماكينة بضوضاء منخفضة ولن تؤثر على البيئة المحيطة، بحيث يمكن لكل عميل استخدامها بثقة، كما تلبى المنتجات المعالجة المتطلبات الأساسية للنقاء والنظافة.

4. مسحوق الطحن ناعم نسبياً. بعد الجهود المتكررة من قبل موظفي البحث والتطوير، فإن قرص الطحن لديه صوت منخفض ومسحوق طحن ناعم. يمكنها طحن المواد التي تحتوي على نسبة عالية من الزيت أو السكر مثل السمسم والجوز واللوز وبذور الخيار وبذور البطيخ الشتوي والتوت البري وكودونوبسيس بيلوسولا إلى أفضل طحن. وهذا يحل مشكلة عدم قدرة المطاحن العادية على طحن المواد المذكورة أعلاه.

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.